

# Guide personnalisé:

Vos appareils auditifs

# Félicitations !

Vous venez d'acquérir des appareils auditifs !

En plus des commodités qu'offre le modèle que vous avez choisi, vous aurez le plaisir de redécouvrir votre univers sonore au fil des prochains jours.

Puisque vous aviez perdu l'habitude d'entendre certains sons, donnez-vous du temps pour vous y adapter de nouveau.

Commencez par porter vos appareils auditifs dans des lieux calmes, quelques heures à la fois. Puis, exposez-vous peu à peu d'autres lieux et activités. Respectez votre rythme.

En tout temps, si vous avez des questions, incertitudes ou inconforts, n'hésitez-pas à nous contacter pour prendre rendez-vous!

Au plaisir de vous accompagner dans vos démarches en santé auditive,

Votre audioprothésiste,

---

## Mes appareils auditifs

À Gauche

Pile # \_\_\_\_\_

Valeur assurable : \_\_\_\_\_

Date de renouvellement : \_\_\_\_\_

À Droite

Pile # \_\_\_\_\_

Valeur assurable : \_\_\_\_\_

Date de renouvellement : \_\_\_\_\_

## Mes accessoires

\*\*\* Nous vous recommandons fortement de faire assurer vos appareils auditifs auprès de votre assureur maison.

## Visites de suivi

Afin d'assurer votre confort, le bon fonctionnement des appareils auditifs et leur durabilité, nous vous conseillons de respecter le plan de suivi tel que suggéré. Ces visites sont incluses dans le coût d'achat de vos appareils auditifs.

### Visite de contrôle :

2 semaines à 1 mois après la livraison, votre audioprothésiste vous rencontrera afin de faire un bilan de votre adaptation et de votre utilisation de vos appareils auditifs, et fera des ajustements au besoin.

### Vérification et nettoyage :

Semi annuellement ou annuellement, votre audioprothésiste vous verra afin de s'assurer du bon fonctionnement de vos appareils auditifs ainsi que pour en faire un nettoyage complet. Elle vérifiera également qu'ils soient encore bien ajustés à vos besoins.

### Visites ponctuelles :

Si vous éprouvez des difficultés techniques ou encore d'adaptation, n'hésitez-pas à prendre rendez-vous avec votre audioprothésiste.

## Conseils d'utilisation

- 1- Désinfectez l'appareil auditif avant de l'insérer dans votre oreille.
- 2- Ouvrez le tiroir-pile de votre appareil auditif lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 3- Déshumidifiez votre appareil auditif chaque soir.
- 4- Retirez délicatement les débris de cerumen (cire d'oreille) visibles sur votre appareil auditif.
- 5- Ne mettez jamais votre appareil auditif sous l'eau
- 6- Lavez-vous les mains avant de manipuler votre appareil auditif.
- 7- Rangez votre appareil auditif toujours au même endroit lorsque vous le retirez.
- 8- Faites assurer vos appareils auditifs.
- 9- Gardez une ou deux piles de rechange en tout temps sur vous.
- 10- Gare aux jeunes enfants et aux animaux de compagnie!

## Les Piles

10



312



13



675



Il est préférable de conserver les piles dans un endroit sec et tempéré. La chaleur, le soleil, l'humidité ou le réfrigérateur peuvent les rendre inutilisables.

Les piles sont scellées individuellement à l'aide d'un petit autocollant qui en empêche la dégradation au contact de l'air. Cet autocollant doit être retiré avant d'insérer la pile dans votre appareil auditif. Si vous retirez l'autocollant (même si vous le recollez par la suite) la pile commencera à se dégrader avec le temps. Nous vous conseillons donc de garder l'autocollant sur la pile jusqu'au moment où vous voudrez vous en servir. Vous devriez également ouvrir le tiroir-pile de vos appareils auditifs lorsque vous ne vous en servez pas, ou en retirer complètement la pile.


Vous pouvez disposer de vos piles utilisées à nos bureaux ou dans tout lieu de recyclage de batteries. Gardez toujours vos piles hors de la portée des jeunes enfants et des animaux de compagnie. Si avalé, contactez le centre anti-poison.

## Entretien à la maison

Il est primordial d'adopter de bonnes habitudes d'entretien pour le port de vos appareils auditifs. Votre routine d'entretien en assurera la durabilité et le maintien de votre santé globale et auditive.

Une gamme complète de produits développés spécialement pour les appareils auditifs sont disponibles à nos bureaux. N'hésitez pas à poser vos questions à votre audioprothésiste ou à tout autre membre de notre équipe.

- \* Nettoyant en vaporisateur
- \* Lingettes désinfectantes
- \* Lubrifiant otologique
- \* Outils spécialisés
- \* Gobelet de séchage
- \* Pastilles de séchage

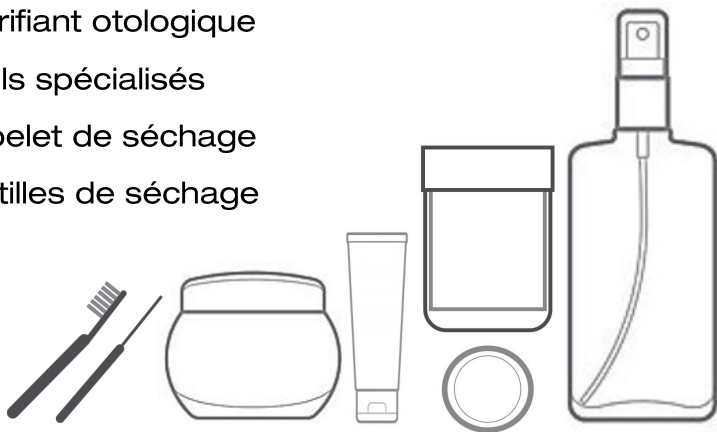

## Hygiène et santé

Il arrive que des bactéries ou des virus se transmettent des mains aux appareils auditifs lors de leur manipulation. Le canal auditif est tapissé d'une fragile et sensible couche de peau. Afin d'éviter les infections, les démangeaisons ou les irritations, vous devriez désinfecter vos appareils auditifs avant de les insérer dans l'oreille.

### \* Vaporisateur

Vaporisez une petite quantité de nettoyant sur un mouchoir ou un linge fin. Nettoyez ensuite délicatement l'appareil auditif à l'aide du mouchoir ou du linge fin. Ne vaporisez jamais de nettoyant directement sur l'appareil auditif !



### \* Lingettes



Nettoyez délicatement l'appareil auditif à l'aide de la lingette humide. Jetez-la après usage.



## \* Lubrifiant otologique



Afin de protéger la peau délicate de votre canal auditif, vous pouvez utiliser un soupçon de lubrifiant otologique pour faciliter l'insertion de votre appareil ou de votre embout.

## Débris / Cerumen

Vous observerez que votre appareil auditif comporte plusieurs petites ouvertures. Votre appareil auditif comporte des microphones, un écouteur et différents conduits. Ces canaux doivent être exempts de débris afin d'assurer que le son puisse passer et que votre appareil auditif fonctionne de façon optimale. Il est normal que du cerumen (cire d'oreille) se retrouve sur votre appareil. Il faut donc vous assurer de retirer les débris visibles afin qu'ils n'encombrent pas votre appareil.

## \* Outils spécialisés

Les outils nécessaires à l'entretien de vos appareils auditifs vous seront fournis avec ces derniers.




# Humidité

Un des principaux ennemis des circuits électroniques que contiennent vos appareils auditifs, est l'humidité. La corrosion peut être causée par la transpiration normale de votre peau. Pour cette raison, il est fortement recommandé de déshumidifier vos appareils auditifs à tous les soirs.


## \* Gobelet de séchage

Retirez les piles de vos appareils auditifs, ou ouvrez le tiroir-pile. Déposez vos appareils dans le panier du gobelet de séchage contenant une pastille de séchage. La pastille est mise au fond du gobelet, sous le panier.

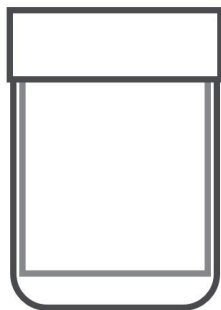

## \* Pastilles de séchage

Retirez le scellant de la pastille. Les grains devraient avoir une teinte d'orangé. Lorsque la majorité des grains a pâli, elle n'es plus efficace. Il faut donc la changer. Une pastille dure approximativement 3 mois pour un usage quotidien normal.

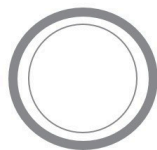



**450.688.6570**

De 9h à 12h, de 13h à 17h

Du lundi au vendredi